

CleanSpace[®]
RESPIRATORS

ELKE ENGEL
VERDIENT HALO

EEN REVOLUTIE IN DE BESCHERMING VAN DE
ADEMHALINGSWEGEN VOOR DE GEZONDHEIDSZORG



NIOSH
APPROVED ✓



WWW.CLEANSPEACEHEALTH.COM



SLIMME TECHNOLOGIE TER BESCHERMING VAN DE ADEMHALINGSWEGEN

CleanSpace® Halo is een Powered Air Purifying Respirator (PAPR) systeem met slimme technologie in een revolutionair, compact ontwerp. CleanSpace biedt de hoogste bescherming in de gezondheidszorg en is tegelijkertijd comfortabel, snel te monteren en gemakkelijk te integreren in elke omgeving.

OPTIMALE COMPLIANCE DOOR COMFORT EN GEBRUIKSGEMAK

POWER UNIT:

- Gepatenteerde AirSensit™ -technologie levert op verzoek koele, gefilterde lucht voor een hoog beschermingsniveau.
- Levert een continue airflow tot 230 l / min voor een werktijd tot 9 uur.
- Bij gebruik van een stethoscoop kan de drager de motor laten stilvallen met een ademgestuurde techniek.

ONTWERP:

- Lichtgewicht apparaat (350g) zonder kabels, slangen of op batterijen gemonteerde accu's.
- Weinig onderdelen en een klein oppervlak zorgen ervoor dat het apparaat snel te reinigen / desinfecteren is en weer in gebruik kan genomen worden.
- Aanpasbare gekleurde voorpanelen om persoonlijk toegewezen apparaten of specifieke zones aan te geven.

Nu is er een nieuwe oplossing voor ademhalingsbescherming. Uw keuze is niet langer beperkt tot warme, moeilijk om door te ademen wegwerp ademhalingsmaskers en grote PAPR-systemen die omslachtig, duur en moeilijk te gebruiken zijn.

MASKER:

- Transparant masker met duidelijke spraakoverdracht zorgt voor gemakkelijke communicatie.
- Zacht siliconenmasker van medische kwaliteit is latexvrij en biedt een comfortabele gevormde afdichting. Frisse lucht in het masker maakt het voor het personeel aangenaam, verwijdert vocht, muffe lucht en voorkomt beslagen brillenglazen.
- Half- en volgelaatsmaskeropties.



FILTER:

- HEPA / P3-bescherming 99,97% filtratie-efficiëntie voor 0,3 micron en groter.



VERZEKERDE BESCHERMING

- **Hoge bescherming:** HEPA / P3-bescherming, 99,97% filtratie-efficiëntie voor deeltjes van 0,3µm en groter. Inclusief biohazards.
- **Volledig getest en gecertificeerd:** goedgekeurd door NIOSH & CE-markering.
- **Watertolerant:** (IP Rating 66): Geschikt voor gebruik in decontaminatiedouches en regelmatige reiniging.
- **Consistente hoge kwantitatieve fit-testen:** gemiddelde fit-factor 3.000. Zorgt ervoor dat het personeel zelfs tijdens drukke periodes wordt beschermd.
- **Compatibel met standaard ziekenhuis-PBM:** (jassen, mutsen en gelaatsschermen). Geen riemen of hoofddekzels. Boven de schouders gedragen.
- **Gebruiksduur opgeladen batterij:** tot 9 uur continu gebruik en snelle oplaadtijd in minder dan twee uur. Alarmen voor een bijna lege batterij zorgen voor een volledige bescherming van elke gebruiker.
- **Betrouwbaar en duurzaam:** stevige, schokbestendige behuizing met een garantie van 3 jaar.


SLIMME KEUZE

- **Minder afval:** : herbruikbaar systeem vermindert het gebruik van wegwerpmaskers, de kosten van afvalverwijdering en de milieueffecten aanzienlijk.
- **Geen noodzaak tot extra stockvoorraad:** het modulaire systeem is flexibel en inzetbaar voor gebruik met grote volumes. Vooral nuttig tijdens risicovolle periodes zoals bij pandemieën.
- **Positief effect op compliance en effectief gebruik:** eenvoudig systeem met weinig onderdelen. Aan- en uittrekken in minder dan 10 seconden. Comfortabel om langdurig te dragen.
- **Meer positieve Fit-testen:** Positieve luchtstroom met AirSensit™ -technologie en persoonlijk aanpassingssysteem bestrijkt een reeks aangezichten om keer op keer hoge Fit-testresultaten te leveren.
- **Gemakkelijk integreerbaar in standaardprotocollen:** bestaat uit materialen van medische kwaliteit die kunnen worden gedesinfecteerd met de meest beschikbare ziekenhuisdesinfectantia. Kan worden gereinigd / gedesinfecteerd op de afdeling of op de Centrale Sterilisatie Afdeling.
- **Flexibele trainingsmogelijkheden:** grote en mobiele teams (omwille van tijdsgebrek en/of personeelstekort) kunnen betrouwbaar en snel worden opgeleid. Online materiaal en ondersteuning door getraind personeel zijn beschikbaar om hierbij te helpen.


KLAAR IN 3 EENVOUDIGE STAPPEN

CleanSpace Halo is intuïtief in gebruik en snel op te zetten in drie simpele stappen - Aanschakelen; Klik het masker in; Aanpassen en wegwezen. Slimme geautomatiseerde technologie detecteert de ademhaling van de drager om de airflow AAN of UIT te zetten.


1. SCHAKEL AAN

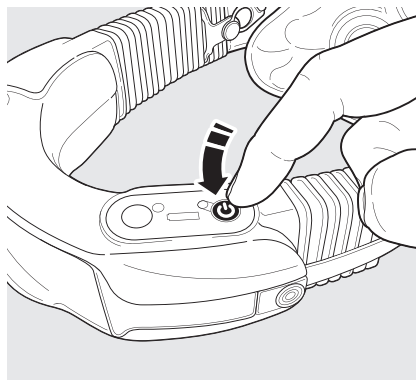

2. INKLIKKEN

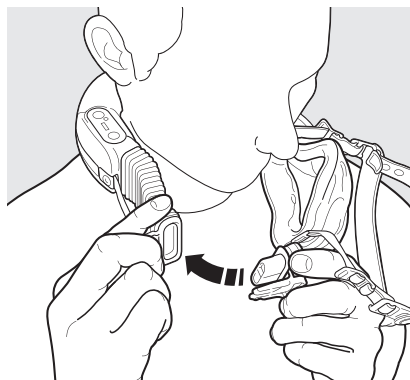

3. MASKER EN HARNAS AANPASSEN. ADEM

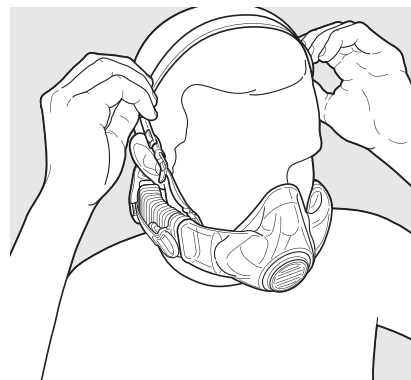

CODES APPARATUUR EN MASKER:

- CS3000** CleanSpace Halo Power Systeem incl. HEPA filter, hoofdarnas, neksteun, oplader, draagtas. EXCL MASKER
- CS3003** Half masker – Small
- CS3004** Half masker – Medium
- CS3005** Half masker – Large
- CS3006** Volgelaatsmasker – Small
- CS3007** Volgelaatsmasker – Medium/Large

FILTER CODES:

- CS3002** HEPA stoffilter (3 stuks)

CODES ACCESSOIRES:

- CS3011** Reinigings- en opbergplug set
- CS3013** Power Unit ID voorpanelen (keuze uit 9 kleuren) (6 stuks)
- CS3015** Masker ID badges (keuze uit 3 kleuren) (10 stuks)
- CS3014** CleanSpace Station Laad- en opbergkast (voor 8 Power Systemen)
- PAF-1024** CleanSpace Autolader



Voor meer informatie: www.cleanspacehealth.com
of neem contact op met onze klantendienst via sales@cleanspacetechnology.com

CleanSpace[®]
RESPIRATORS