

CleanSpace[®]
RESPIRATORS

KAŻDY ANIOŁ STRÓŻ
ZASŁUGUJE NA HALO

REWOLUCYJNA OCHRONA
DRÓG ODDECHOWYCH
DLA SŁUŻBY ZDROWIA



NIOSH
APPROVED ✓



WWW.CLEANSPEACEHEALTH.COM

INTELIĞENTNA TECHNOLOGIA DLA OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH

CleanSpace® Halo jest systemem filtrującym z własnym zasilaniem (PAPR) zawierającym inteligentną technologię w rewolucyjnie kompaktowym urządzeniu. CleanSpace zapewnia maksymalną ochronę dla pracowników służby zdrowia i opieki medycznej, przy jednoczesnym komforcie użytkownika, szybkiej instalacji i łatwej integracji w każdym otoczeniu.

OSIĄGNIĘCIE WYGODY W POŁĄCZENIU Z ŁATWOŚCIĄ UŻYTKOWANIA

MODUŁ ZASILANIA:

- Opatentowana technologia AirSensit™ dostarcza chłodne filtrowane powietrze na żądanie dla zapewnienia maksymalnego poziomu ochrony.
- Wytwarza przepływ powietrza do 230 L/min działając do 9 godzin.
- W przypadku konieczności zastosowania stetoskopu użytkownik może wyciszyć pracę silnika przy pomocy oddechu.

Nowe rozwiązanie w ochronie dróg oddechowych. Twój wybór nie jest już ograniczony do gorących i dusznych jednorazowych masek oraz dużych systemów PAPR, które są niewygodne, kosztowne i kłopotliwe w użyciu.

MASKA:

- Przezroczysta maska zapewniająca czystą transmisję głosu pozwala na łatwą komunikację.
- Miękką silikonową maskę o jakości medycznej nie zawiera lateksu i zapewnia wygodne uszczelnienie. Świeże powietrze płynące z maski chłodzi użytkownika, eliminuje wilgoć, stęchłe powietrze i zapobiega zamgleniu.
- Dostępny wariant pełnej maski lub półmaski.

KONSTRUKCJA:

- Lekki aparat (<400g/0,9lb) bez przewodów, węży lub zestawu baterii mocowanych do paska.
- Niewielka ilość elementów i mała powierzchnia pozwalają na szybkie oczyszczenie/dezynfekcję i ponowne zastosowanie.
- Konfiguracja kolorów paneli pozwala określić komu lub gdzie wydano urządzenia.



FILTR:

- Efektywna filtracja cząstek 0,3 mikronowych lub większych filtrem HEPA/P3 na poziomie 99,97%.



PEWNOŚĆ OCHRONY

- **Wysoki poziom ochrony:** efektywna filtracja cząstek 0,3µm lub większych filtrem HEPA/P3 na poziomie 99,97% włącznie z zagrożeniami biologicznymi.
- **W pełni przetestowany i certyfikowany:** zatwierdzony przez NIOSH/CE.
- **Odporny na wodę:** (Klasa IP 66): można stosować w prysznicach odkażających i często myć.
- **Regularne wysokie wyniki testów dopasowania:** Przeciętny współczynnik dopasowania to 3.000. Zapewnia to, że pracownicy są pod ochroną nawet podczas intensywnego sezonu.
- **Kompatybilny ze standardowym szpitalnym wyposażeniem ochrony osobistej:** (fartuchy, czepki i osłony twarzy). Bez pasków oraz instalacji na szczycie głowy. Noszony na karku.
- **Długi okres pracy baterii:** do 9 godzin ciągłej eksploatacji oraz szybkie ładowanie nie przekraczające 2 godzin. Alarm ostrzegający o niskim poziomie naładowania baterii zawsze zapewnia ochronę wszystkim użytkownikom.
- **Niezawodny i trwały:** solidna, odporna na wstrząsy obudowa. Objęty 3 - letnią gwarancją.


MĄDRY WYBÓR

- **Redukcja ilości odpadów:** system wielokrotnego użytku znacznie redukuje potrzebę korzystania z jednorazowych masek, koszt usuwania odpadów oraz negatywny wpływ na środowisko.
- **Eliminacja konieczności magazynowania:** modułowy elastyczny system skalowalny do intensywnego użytkowania. Szczególnie efektywny w sytuacjach wysokiego zagrożenia takich jak pandemia.
- **Zapewnienie skuteczności i efektywności:** prosty system z niewielką ilością elementów. Czas zakładania i zdejmowania krótszy niż 10 sekund. Komfortowy w użyciu przez dłuższy okres czasu.
- **Uproszczony system dopasowywania:** nadmuch powietrza z technologią AirSensit™ oraz osobisty system regulacji mający zastosowanie do wielu typów twarzy pozwalają zawsze osiągnąć wysoki wynik testu dopasowania.
- **Integracja ze standardowymi procesami:** materiał jakości medycznej może być dezynfekowany standardowymi środkami szpitalnymi. Może być myty/dezynfekowany na oddziale lub w scentralizowanym punkcie przygotowywania sprzętu do ponownego użytku.
- **Elastyczne opcje szkolenia:** możliwość szybkiego i dokładnego przeszkolenia licznej grupy osób w krótkim czasie. Materiał szkoleniowy jest dostępny online, zaś zespół obsługi klientów wspiera użytkowników w procesie szkolenia.


GOTOWY DO UŻYTKU W TRZECH PROSTYCH KROKACH

CleanSpace Halo jest intuicyjny w użyciu i można go szybko zainstalować w trzech prostych krokach – Włącz; Podłącz maskę; Dopasuj maskę i zacznij używać, Inteligentna zautomatyzowana technologia wyczuwa oddech użytkownika by włączyć i wyłączyć przepływ powietrza.


1. WŁĄCZ

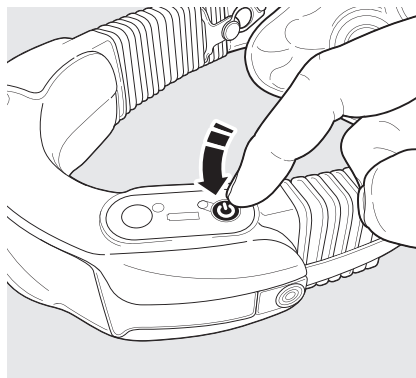

2. KLIKNIJ BY POŁĄCZYĆ

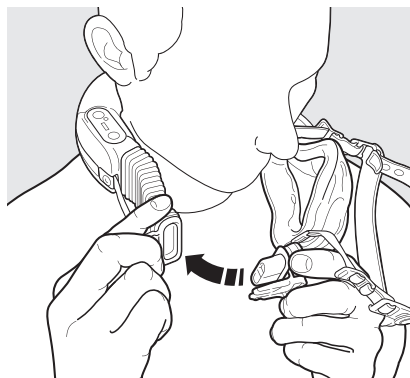

3. DOPASUJ MASKĘ I NAGŁOWIE I PO PROSTU ODDYCHAJ

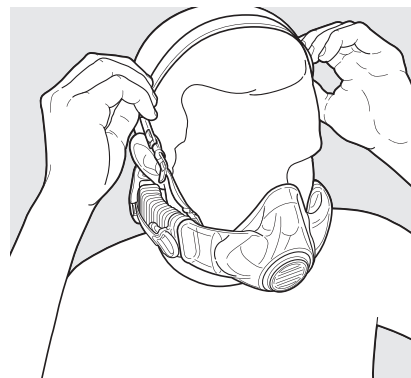

KODY RESPIRATORA I MASEK:

- CS3000** CleanSpace Halo Power System z filtrem HEPA, mocowanie na głowę, podkładka na kark, ładowarka, torba. BEZ MASKI
- CS3003** Półmaska – mała
- CS3004** Półmaska – średnia
- CS3005** Półmaska – duża
- CS3006** Pełna maska – mała
- CS3007** Pełna maska – średnia/duża

KODY FILTRÓW:

- CS3002** HEPA Filtr cząstek stałych (pakiet 3 filtrów)

KODY AKCESORIÓW:

- CS3011** Zestaw połączeń do czyszczenia i składowania
- CS3013** Panele identyfikacyjne zasilacza (9 kolorów do wyboru) (6 w pakiecie)
- CS3015** Identyfikatory masek (3 kolory do wyboru) (10 w pakiecie)
- CS3014** CleanSpace Stacja do ładowania i składowania urządzeń (dla 8 jednostek)
- PAF-1024** CleanSpace ładowarka samochodowa



Więcej informacji znajdziesz na: www.cleanspacehealth.com

lub skontaktuj się z zespołem obsługi klientów pod adresem: sales@cleanspacetechnology.com

CleanSpace®
RESPIRATORS